

Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de usar.

Características y especificaciones del producto


Este kit está impregnado con anticuerpo seco Anti-A o lectina para determinar el tipo de sangre de A, B o AB.

Unidad de paquete

Cada caja contiene:


Componentes	5 Pruebas / Caja	10 Pruebas / Caja
Bolsas de plástico, cada una contiene un kit para la determinación de la sangre, palos y desecante.	5	10
Gotero desechable	5	10
Tampón de ensayo (3 ml)	1	2
Tarjeta de sangre	5	10
Manual de instrucciones	1	1

Procedimiento de prueba

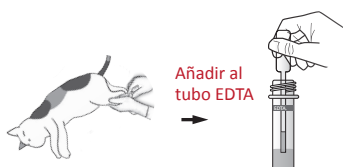


1

Recoge 0.5 ml de sangre.
(Use un tubo con EDTA o anticoagulantes)

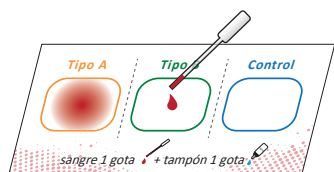


2

Ponga una gota de sangre (20-30 µL) en cada pozo de tarjeta de sangre

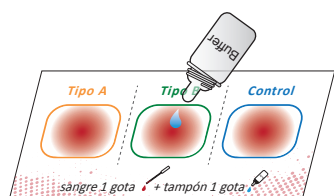


3

Ponga una gota de tampón (20-30 µL) en cada pozo de tarjeta de sangre

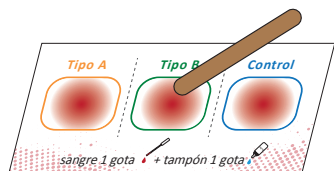

4

Mezcle con una barra durante 15 segundos (use diferentes barras en cada pocillo)

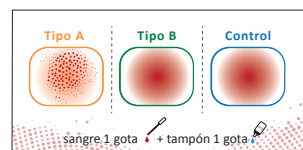

5


Examinar la aglutinación en 2 minutos.

Interpretación de los resultados

Tipo A			Tipo B		
Tipo A	Tipo B	Control	Tipo A	Tipo B	Control
aglutinación en el pozo A			aglutinación en el pozo B		
Tipo AB			Falsa (+)		
Tipo A	Tipo B	Control	Tipo A	Tipo B	Control
Aglutinación en los pocillos A y B			Aglutinación en el pozo de control		

Falsa (+) : Sangre mal condicionada o enfermedad hemolítica autoinmune.

Posibles transfusiones

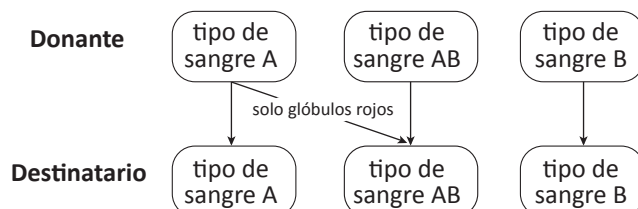

✳ Antes de la transfusión de sangre, también es esencial realizar una prueba cruzada importante, para verificar aloanticuerpos desconocidos que ocurren naturalmente

Método de almacenamiento y fecha expirada

	Condición de almacenamiento	Fecha de vencimiento de fabricación
sin abrir	Temperatura ambiente (2 – 30 °C)/ humedad (20 – 80 %)	12 meses
abrió	Temperatura ambiente (16 – 26 °C)/ humedad (20 – 80 %)	inmediatamente

Advertencia

- No use sangre durante 5 días desde la recolección.
- Debe ser utilizado por el veterinario.
- Mantenga el producto a temperatura ambiente.
- En caso de que el paciente tenga una enfermedad autoinmune mediada, tenga cuidado de que pueda causar resultados falsos positivos o negativos.
- El nivel de hematocrito de la muestra debe ser del 20% al 35% para la aglutinación del tipo de sangre felina.
- No use productos vencidos
- Para evitar el mal uso y el deterioro de la calidad, no use un tampón que no sea el provisto en este kit.

Cambie los productos vencidos, deteriorados, dañados y manchados en el momento de la compra, en su distribuidor local.