



For Veterinary Use Only

VLabs 3DX

- Canine Parvovirus Antigen
- Canine Coronavirus Antigen
- Giardia Antigen

Combo Test



Testul Bioguard VLabs 3DX Canine Parvovirus (CPV) Ag / Canine Coronavirus (CCV) Ag / Giardia Ag Combo Test are la bază reacția imunocromatografică de tip sandwich cu flux lateral, dezvoltat și fabricat de către Bioguard Corporation, pentru determinarea rapidă și calitativă a Canine Parvovirus, Canine Coronavirus și Giardia din fecale la câine. Dispozitivul de testare are o fereastră de testare, acoperită de o zonă invizibilă T (test) și zonă C (control). Când proba este aplicată în orificiu pentru probă a dispozitivului, lichidul va curge prin flux lateral pe suprafața benzii de testare C. Dacă există suficient CPV Ag / CCV Ag / Giardia Ag în eșantion, va apărea o bandă T vizibilă. Dacă testul este pozitiv, banda T devine vizibilă. Banda C ar trebui să apară întotdeauna după ce se aplică un eșantion, indicând faptul că testul a fost corect realizat. Astfel, dispozitivul poate indica cu precizie prezența de CPV Ag / CCV Ag / Giardia Ag la câine.

COMPONENTELE KITULUI


COMPONENTE	5 TESTS /BOX	10 TESTS /BOX
Dispozitiv de testare VLabs 3DX	5	10
Pipetă de unică folosință	5	10
Recipient cu solvent pentru analiză	5	10
Bețisor cu vată steril	5	10
Manual de instrucțiuni	1	1

PROBE

Fecale.


INSTRUCȚIUNI

- Se scoate un test, recipientul cu solventul pentru analiză și bețisorul cu vată din cutie.
- Scoateți caseta de testare din folia de protecție și așezați-o pe o suprafață orizontală și curată.
- Prelevați proba de fecale de la câine cu bețisorul cu vată, asigurați-vă că vârful este suficient de bine îmbibat cu proba de fecale.
- Cantitatea de fecale pe tampon poate afecta rezultatele. Este necesar să respectați cantitatea de fecale pe bețisor după cum este prezentat în imaginea de mai jos. O cantitate în exces de fecale poate induce un fals rezultat pozitiv și o migrare redusă.**
- Deșurubați capacul recipientului cu solvent furnizat. Se introduce bețisorul cu probă și se amestecă proba în tub. Agitați-l pentru a vă asigura că proba a fost bine dizolvată în recipient.
- Treptat adăugați (5) picături (100 ul) din proba rezultată în orificiul pentru testare al casetei (cu ajutorul pipetei). Îndepărtați sedimentul în caz de obstrucție.
- Interpretați rezultatul în 5-10 minute. Rezultatul citit după 10 minute numai este valabil.

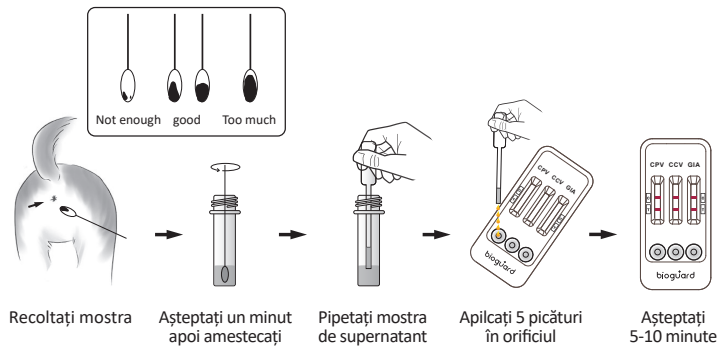

INTERPRETAREA REZULTATELOR

- 1) Pozitiv:** Prezența ambelor benzi C și T, indiferent dacă banda T este clară sau vagă.
- 2) Negativ:** Apare doar banda C clar.
- 3) Invalid:** Nicio bandă colorată nu apare în zona C, indiferent dacă apare banda T.

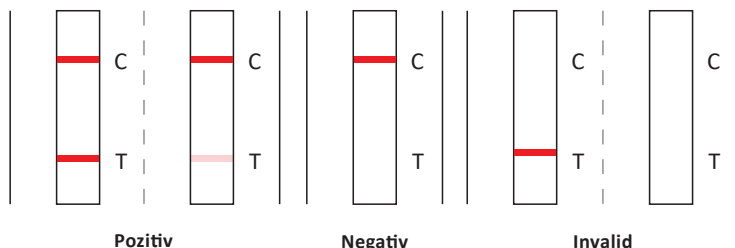

DEPOZITARE

- Kiturile de testare trebuie păstrate între 2-30 ° C.. Dacă se depozitează în condiții de frig, se păstrează la temperatura camerei pentru 15-30 de minute înainte de utilizare.
- A NU SE CONGELA.**
- Nu depozitați kitul de testare în lumina directă a soarelui.
- Kiturile de testare se pot folosi până la data expirării (24 luni) marcată pe folie.

PRECAUȚII

- Pentru cele mai bune rezultate, vă rugăm să respectați cu strictețe aceste instrucțiuni.
- Vă rugăm să fiți atenți la data de expirare marcată pe folie înainte de utilizare. Nu utilizați kiturile expirate.
- Nu scoateți kitul din folia de protecție până când testul nu este gata să fie efectuat, în cazul în care testul este expus excesiv aerului poate fi afectat de umiditate, întregul proces de manipulare a testului ar trebui să fie terminat în decurs de 10 minute după deschiderea foliei de protecție.
- Toate dispozitivele de testare din cutie, inclusiv kitul de testare, pipeta, soluția de testare (solvent) sunt de unică folosință. A nu se refolosi. Odată ce testul este finalizat, vă rugăm să aruncați în mod corespunzător toate speciile și trusele în conformitate cu bunele practici de laborator (GLP).
- Nu mutați banda de test după ce probele au fost aplicate în zona de testare, în cazul apariției de situații anormale pe benzile de testare.
- Componentele acestui kit au fost testate în privința controlului calității ca unitate standard de serie. A nu se amesteca componente din loturi cu numere diferite.
- Nu folosiți kitul de testare dacă ambalajul sau sigiliul sunt rupte.
- Toate probele vor fi tratate ca fiind potențial infecțioase.
- La manipularea probelor, purtați mănuși de protecție. După manipulare, spălați bine mâinile.

LIMITĂRI

Acesta este un test de diagnostic în vitro numai pentru uz veterinar. **Deși cu o acuratețe ridicată testul nu poate exclude toată posibilitatea falsului negativ și a falsului pozitiv, cauzate de diverși factori.** Toate rezultatele trebuie să fie corelate și cu alte informații clinice disponibile de la medicul veterinar. Pentru un rezultat corect și pentru un diagnostic definitiv în practică se recomandă aplicarea și a altor metode, cum ar fi PCR.

