




Sadece hayvan sağlığında kullanılır

VLabs 3DX


- Canine Parvovirus Antigen
- Canine Coronavirus Antigen
- Giardia Antigen

Combo Test

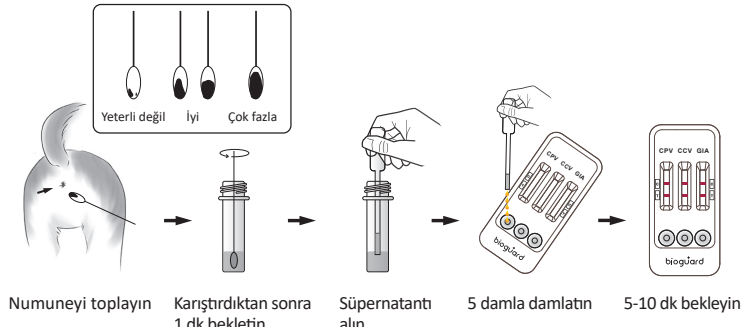

SONUÇLARIN YORUMLANMASI

- 1) Pozitif:** T bandının belirgin veya belli belirsiz olmasına bakılmaksızın, hem C hem de T bandının varlığı.
- 2) Negatif:** Sadece belirgin C bandının görünmesi.
- 3) Geçersiz:** T bandının görünüp görünmemesine bakılmaksızın, C bölgesinde renkli bandın görünmemesi.

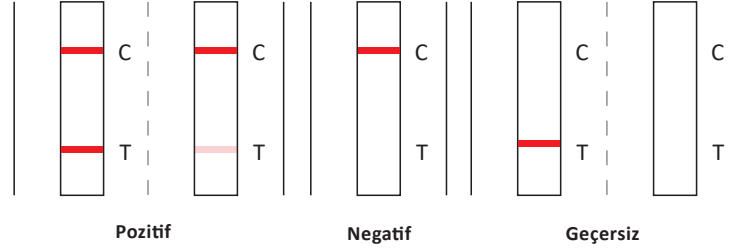

KULLANIM AMACI

Bioguard VLabs 3DX Testi, köpek dışkısında Köpek Parvovirüs (CPV), Köpek Koronavirüs (CCV) ve Giardia (GIA)'nın hızlı ve nitel tespiti için Bioguard Corporation tarafından geliştirilmiş ve üretilmiş bir sandviç yanal akış immünokromatografik testtir. Test cihazı, görünmez bir T (test) bölgesi ve C (kontrol) bölgesi ile kaplı olan bir test penceresine sahiptir. Numune, cihazdaki numune bölmesine uygulandığında; reaktif, test şeridinin yüzeyinde yanal olarak akacaktır. Numunede yeterli CPV antijeni/CCV antijeni/GIA antijeni varsa, görülebilir bir T bandı belirecektir. Geçerli bir sonuç elde edilebilmesi için, bir numune uygulandıktan sonra C bandı her zaman görünmelidir. Bu sayede cihaz, numunede CPV Ag/CCV Ag/GIA Ag varlığını doğru bir şekilde gösterebilir.

KİT İÇERİĞİ

İÇERİK	5 TEST/KUTU	10 TEST/KUTU
VLabs 3DX test cihazı	5	10
Tek kullanımlık damlalık	5	10
Test buffer tüpü	5	10
Steril swab	5	10
Kullanım kılavuzu	1	1

NUMUNE

Köpek dışkısı.

TEST PROSEDÜRÜ

- Kapalı ambalajı, test buffer tüpünü ve steril swabı kutudan çıkarın.
- Kaseti folyo ambalajından çıkarın ve yatay olarak temiz bir yüzeye yerleştirin.
- Köpeğin dışkısını swabla toplayın ve dışkının swaba iyice emilmesi ni sağlayın.
Dışkı miktarını, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi takip etmek gerekmektedir. Aşırı miktarda dışkı yanlış pozitif bir sonuca ve yavaş aktarıma neden olabilir.
- Sunulan test buffer tüpünün kapağını açın. Numune swabını tüpe yerleştirin ve karıştırın. Numunenin buffer solüsyon içinde iyi çözündüğünden emin olmak için çalkalayın.
- Tek kullanımlık damlalık uygulamasıyla her bir numune bölmesine kademeli olarak 5 damla (100µL) numune özütü damlatın (tıkanıklık durumunda tortuyu uzaklaştırın).
- Sonucu 5-10 dakika içinde yorumlayın. **10 dakikadan sonra sonuç geçersizdir.**

DEPOLAMA

- Test kitleri doğrudan güneş ışığından uzakta, 2-30°C arasında saklanmalıdır. DONDURMAYIN. Soğuk koşullarda saklanması durumunda, kullanmadan önce 15~30 dakika oda sıcaklığında tutun.
- Test kitleri, folyo ambalaj üzerinde belirtilen son kullanma tarihine kadar (24 ay) stabildir.
- Seri numarası ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiştir.

UYARILAR

- En iyi sonucu elde etmek için, lütfen bu talimatlara kesin olarak uyun.
- Lütfen kullanmadan önce folyo ambalaj üzerinde belirtilen son kullanma tarihine dikkat edin. Kullanım süresi dolmuş kitleri kullanmayın.
- Kitin havaya uzun süre maruz kalmasını ve nemden etkilenmesini önlemek için test yapılmaya hazır olana kadar kiti folyo ambalajından çıkarmayın. **Folyo ambalaj açıldıktan sonra tüm kullanım işlemi 10 dakika içinde tamamlanmalıdır.**
- Test kiti, damlalık, test buffer solüsyonu ve swab dahil olmak üzere kutudaki tüm test malzemeleri tek kullanımlıktır. Yeniden kullanmayın.
- **Teşhis kitlerini, kullanılan tüm pleytlerini, numunelerini, işlem görmüş tüm materyallerini, ekipman ve sarf malzemelerini dekontaminasyon yöntemleri ile dekontamine edildikten sonra tıbbi ürünlerde olduğu gibi "Tıbbi Atık" olarak değerlendirilmesi ve tıbbi atıklar için oluşturulmuş mevzuatlara göre imha edilmesi sağlanmalıdır.**
- Test şeritlerinde anormal oluşumların meydana gelmesini engellemek için, numune bölmelerine numuneyi uygulandıktan sonra test cihazını hareket ettirmeyin.
- Bu kitteki malzemeler standart bir seri birimi olarak kalite kontrole tabi tutulmuştur. Farklı seri numaralı birimlerden malzemeleri karıştırmayın.

SINIRLAMA

Bu test sadece hayvan sağlığında kullanım ve in vitro tanı içindir, **çeşitli faktörlerin neden olduğu yanlış negatif ve yanlış pozitif sonuç alma olasılığını tamamen ortadan kaldırmaz.** Bu nedenle, test kitlerinden elde edilen sonuçların yanı sıra, veteriner hekimler pratikte kesin tanı koymak için diğer klinik bilgileri ve laboratuvar tanı yöntemlerini de dikkate almalıdır.

